



Perfeito para testes de umidade de rotina

O novo OHAUS MB32 traz uma estrutura redesenhada, com material ainda mais resistente, tecnologia inovadora de aquecimento de fibra de carbono e uma célula de carga atualizada para maior durabilidade e desempenho. O MB32 fácil de usar é a escolha perfeita para testes de umidade de rotina.

Características únicas:

- Com um display LCD com segunda linha para visualização de informações, botão de navegação e sistema de operação intuitivo torna simples o teste de umidade de rotina.
- A nova tecnologia de aquecimento de fibra de carbono e a célula de carga atualizada reduzem o tempo de análise, economizam energia e mantêm os resultados precisos e consistentes.
- Design robusto e compacto com uma carcaça resistente garante a durabilidade do MB32 mesmo em ambientes agressivos.

MB32 Analisadores de Umidade

Especificações

Modelo	MB32
Resolução	0.01 % / 0.001 g
Repetibilidade	0.15 % (amostra de 3 g) 0.02 % (amostra de 10 g)
Faixa de umidade	0.01 % a 100 % (0.01 % a 1000 % em modo de recuperação)
MC% recomendado	0.5 % a 100 %
Peso Mínimo de Início	0.5 g
Capacidade	90 g
Elemento de aquecimento	Fibra de Carbono
Faixa de Temperatura	40-180 °C (incrementos de 1 °C)
Programas de Secagem	Padrão, Rápido
Biblioteca de métodos	2
Armazenamento de resultados	1
Crítérios de desligamento	3 automático, cronometrado (1 - 480min), manual
Gerenciamento de ID	-
Luz de status	-
Instrução de Operação	Indicador de progresso Instrução na tela
Tipo de exibição	LCD de 4" com 2ª linha no display
Exibição de resultados	MC%, DC%, RG%, tempo, temperatura, peso, Método n°.
Idioma	Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, chinês, coreano, japonês, polonês, turco
Ajuste	Ajuste de temperatura (100 °C, 160 °C) Ajuste de peso externo (50 g)
Saída	RS232, dispositivo USB
Fonte de energia	120 ou 240VAC 50/60 Hz
Faixa de Temperatura de Operação	10 °C - 40 °C
Tamanho do prato	Ø 90 mm
Dimensão	210 x 138 x 352 mm
Peso líquido	4.3 kg
Peso bruto	6.1 kg


Conformidade

- **Segurança do produto:** IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; CAN/CSA C22.2 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-2-010; UL 61010-1; ANÚNCIO 61010-2-010
- **Compatibilidade Eletromagnética:** IEC/EN 61326-1 Classe B, Ambientes básicos; FCC Parte 15 Classe A; Canadá ICES-003 Classe A
- **Marcas de Compliance:** CSA; CE; RCM; REEE

Acessórios

Suporte de prato, MB32 MB62 MB92	30954234
Capa em uso, MB32 MB62	30954235
Kit de calibração de temperatura	11113857
Colher	30284477
Prato de alumínio (50)	30585411
Fibra de vidro (200)	80850087
Prato de amostra c/ tampa	80252477
Prato reutilizável, Conjunto (3), 7 mm	80252478
Prato reutilizável, conjunto (3), 14 mm	80252479
SF40A Impressora de impacto	30045641

Dimensões externas

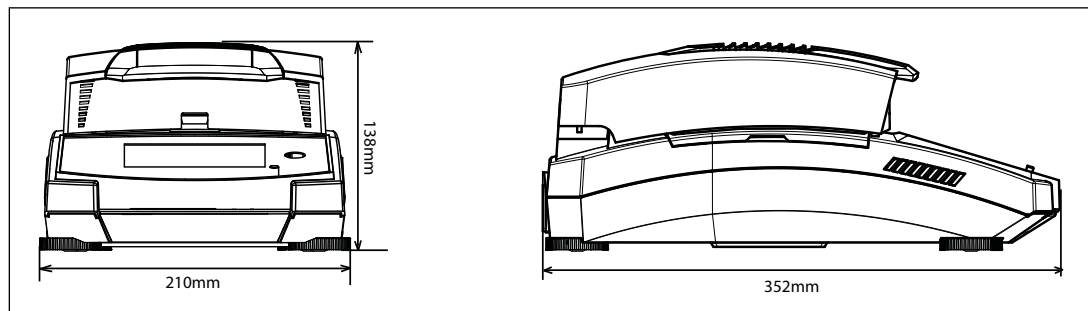

80776948_A 20240705 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Brazil

Av. Tamboré, 418 - Tamboré
06460-000 - Barueri - SP -
Brasil

Tel.: (11) 4166-7400
Fax: (11) 4166-7457

www.ohaus.com.br

* ISO 9001:2015

Registered Quality
Management System

SAP Literature: 30962894

